


smartdot[™]


Panduan Penggunaan

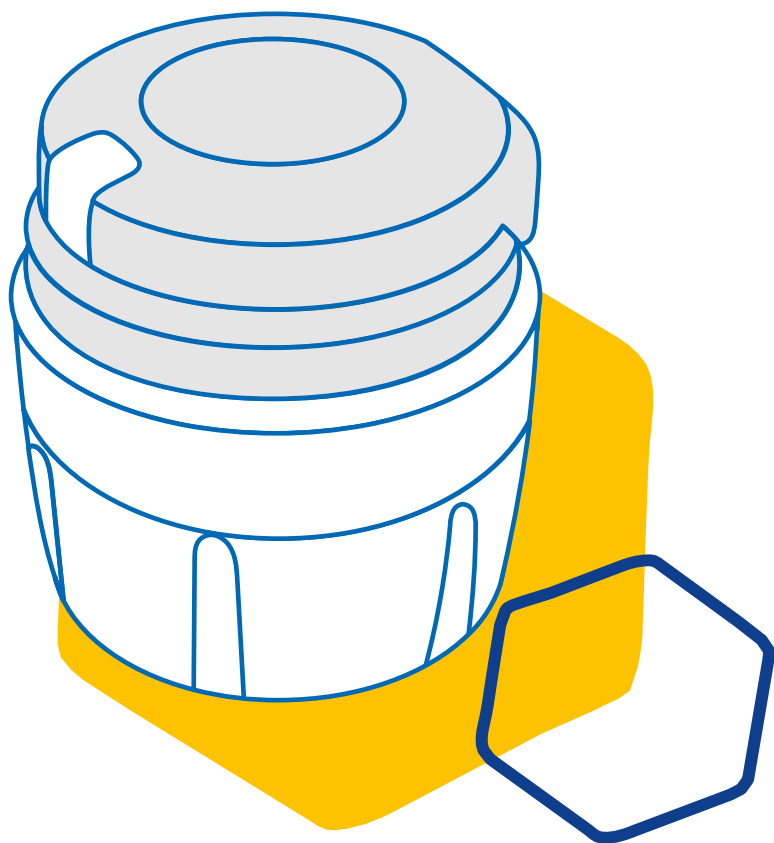

MERCK

ISI KANDUNGAN

Bahagian 1	Maklumat keselamatan	3
Bahagian 2	Kandungan kotak	5
Bahagian 3	Pemancar smartdot™ anda	6
Bahagian 4	Lampu suar bagi pemancar smartdot™	7
Bahagian 5	Persediaan	8
Bahagian 6	Proses suntikan	13
Bahagian 7	Penyimpanan	16
Bahagian 8	Pertanyaan umum	17
Bahagian 9	Panduan Penyelesaian Masalah	21
Bahagian 10	Maklumat berkenaan peraturan komunikasi radio	26
Bahagian 11	Maklumat berkenaan peraturan sisa elektronik	27
Bahagian 12	Spesifikasi teknikal	28
Bahagian 13	Simbol dan maklumat pembungkusan	32

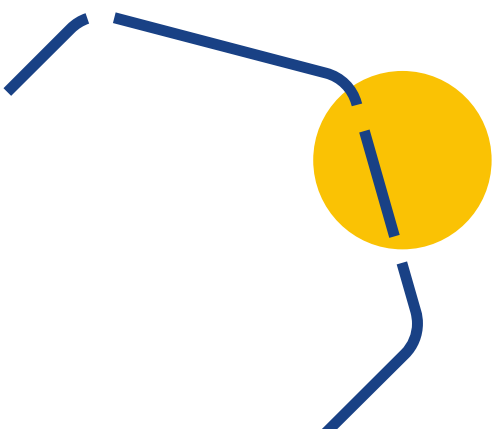


- Pemancar smartdot™ adalah bertujuan untuk menyimpan dan memindahkan data suntikan semasa rawatan hormon pertumbuhan diberikan.
- Pemancar smartdot™ hanya dapat digunakan semasa Saizen® (somatotropin) disuntik menggunakan pen penyuntik Merck.
- Data suntikan dipindahkan kepada aplikasi mudah alih yang serasi dengan smartdot™ melalui teknologi Bluetooth®. Pakar penjagaan kesihatan anda memiliki akses kepada data ini.
- Pemancar smartdot™ boleh digunakan semula dan mempunyai bateri yang dapat dicas semula.
- Anda **dilarang** berkongsi pemancar dengan individu lain. Pemancar smartdot™ adalah bertujuan untuk penggunaan di rumah dan oleh seorang individu sahaja.
- Pemancar smartdot™ tidak mengubah proses suntikan menggunakan pen. Anda diminta membaca arahan penggunaan pen penyuntik sebelum mula menggunakan pemancar.
- Jauhkan pemancar daripada capaian kanak-kanak. Bahagian bersaiz kecil boleh disedut atau ditelan dan berisiko menyebabkan tercekik. Jika pemancar smartdot™ digunakan oleh kanak-kanak, ia harus di bawah pengawasan orang dewasa.



MAKLUMAT PENTING:

Sila baca semua arahan dalam panduan ini sebelum menggunakan pemancar smartdot™.


Untuk menjaga prestasi dan jangka hayat pemancar smartdot™, sila patuhi ketetapan persekitaran seperti berikut:

- **Jangan** gunakan pemancar di persekitaran yang mempunyai bahan-bahan yang mudah terbakar atau beroksigen.
- **Jangan** gunakan pemancar smartdot™ saat semasa dicas.
- **Jangan** gunakan pemancar smartdot™ jika terdapat ciri-ciri kerosakan yang nyata. Hubungi pakar penjagaan kesihatan anda untuk mendapatkan sebarang bantuan.
- **Jangan** cuba mengubah atau membaik pulih pemancar smartdot™. Perbuatan sedemikian mungkin akan merosakkan pemancar atau mencederakan anda. Sila ambil maklum yang pemancar smartdot™ tidak memerlukan penyelenggaraan khusus selama tempoh pemakaiannya.
- Pemancar smartdot™ ialah produk elektronik. Anda **dilarang** membuangnya bersama buangan isi rumah. Buanglah di tempat yang dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan.

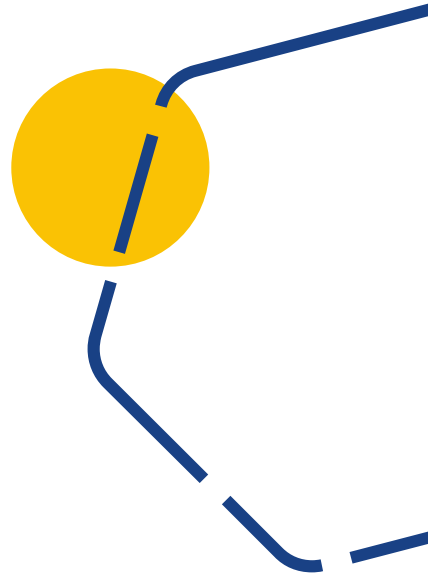


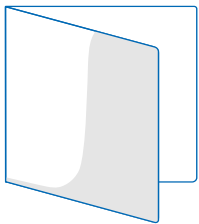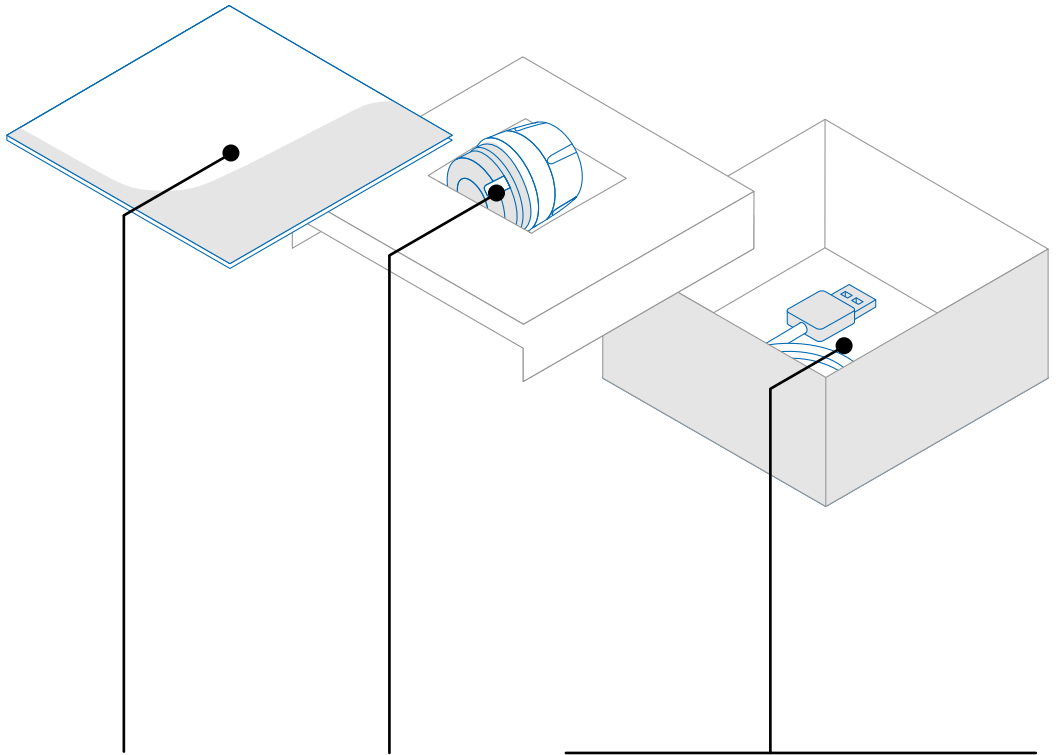


Panduan Mula
Cepat

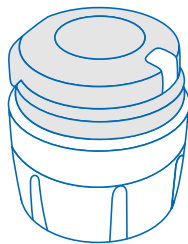

Pemancar
smartdot™


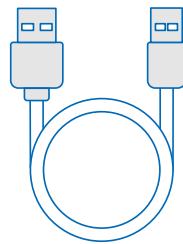


Kabel USB

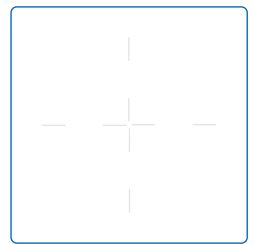

Maklumat
Pematuhan


Catatan:
Pengecas USB tidak disertakan.

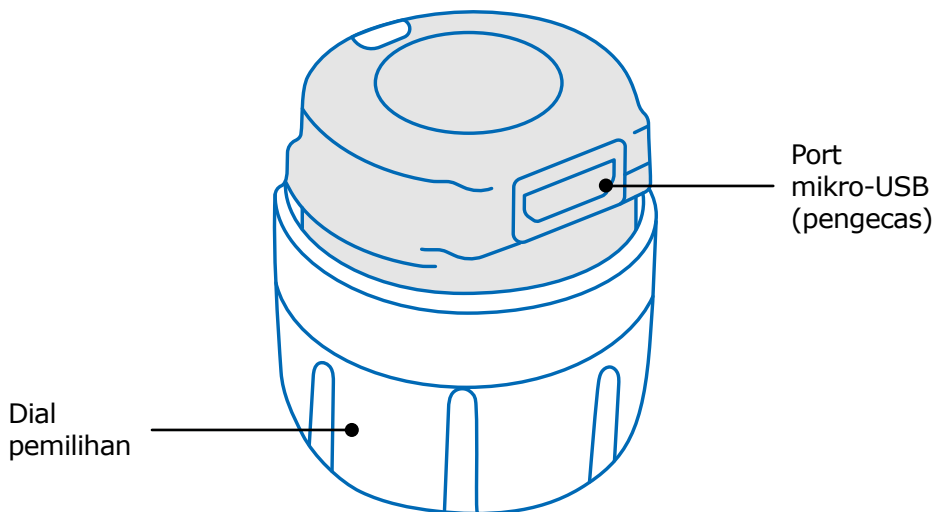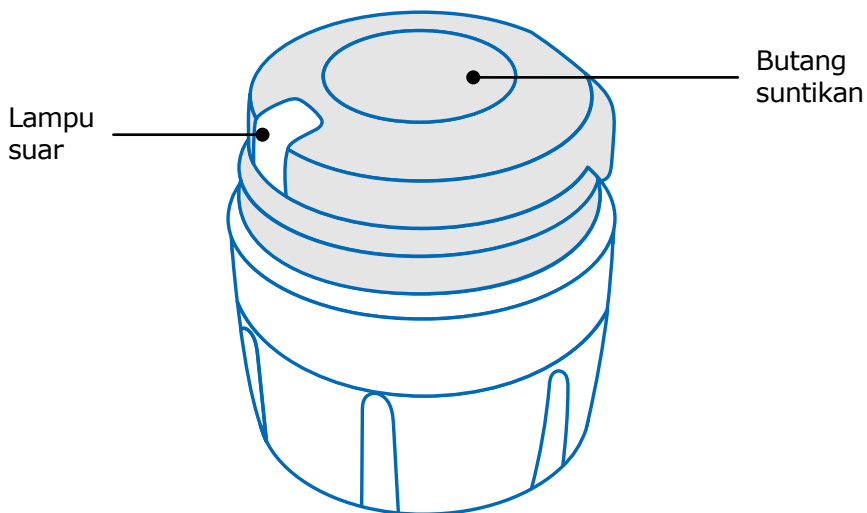



Kerlipan biru

Lampu biru yang berkelip menunjukkan bahawa pemancar smartdot™ sedang dicas. Pemancar smartdot™ tidak akan lagi mengerdipkan cahaya apabila dicas penuh dan sebelum diaktifkan. Rujuk "Bahagian 5: Persediaan <A. Pengecasan pemancar smartdot™ anda."

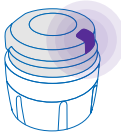

Lampu ungu

Cahaya ungu akan menyala ketika pengaktifan atau penyahaktifan berlaku. Rujuk "Bahagian 5: Persediaan < E. Pengaktifan pemancar smartdot™ anda."



Lampu Hijau


Lampu hijau menunjukkan bahawa pemancar smartdot™ diaktifkan dan sedia untuk digunakan. Lampu hijau akan terpadam setelah beberapa saat tidak aktif. Untuk mengaktifkan kembali lampu, tekan butang suntikan. Rujuk "Bahagian 5: Persediaan < E. Pengaktifan pemancar smartdot™ anda" tetapan semula.

Isyarat baik pulih kerosakan




Lampu Jingga

Lampu jingga akan menyala apabila bateri lemah. Rujuk "Bahagian 9: Panduan Baik pulih Kerosakan < Lampu Jingga."

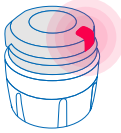


Lampu Merah

Lampu merah menunjukkan pemancar smartdot™ gagal berfungsi. Rujuk "Bahagian 9: Panduan Baik pulih Kerosakan <Lampu Merah."

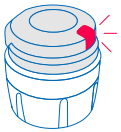

Kerlipan lampu merah

Lampu merah yang berkelip menunjukkan bahawa proses sedang berlaku. Lihat "Bahagian 9: Panduan Baik pulih Kerosakan <Lampu merah <Apa yang perlu saya lakukan?"

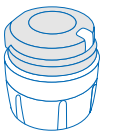

Tiada tanda isyarat

Jika pemancar smartdot™ dipasangkan dan diaktifkan, lampu suar akan muncul setiap kali butang suntikan ditekan. Jika tidak ada cahaya yang muncul, ini bermakna bateri pemancar sudah habis. Rujuk "Bahagian 9: Panduan Baik pulih Kerosakan <lampu tidak menyala" untuk keterangan lebih lanjut.




Mengecas pemancar smartdot™ anda

Anda harus mengecas pemancar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.

Pemancar smartdot™ akan menyala secara automatik ketika anda memasang kabel USB.

Setelah pengecasan awal, pemancar anda perlu diulang cas kira-kira setiap 2 minggu.

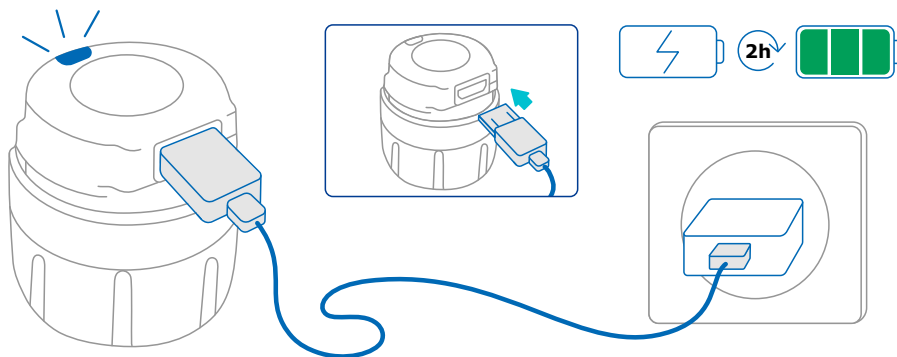

1. Sambungkan pemancar smartdot™ ke kabel USB yang disediakan.
2. Sambungkan kabel ke pengecas USB di dinding yang dihidupkan.
3. Pemancar akan menyalakan **lampu biru yang berkelip** untuk memberi isyarat yang pemancar sedang dicas. Pengecasan penuh boleh mengambil masa sehingga 2 jam.
4. Apabila pemancar sudah dicas penuh, **lampu biru yang berkelip** akan hilang dan tiada lagi lampu yang akan menyala.
5. Tanggalkan kabel pengecasan. Pemancar smartdot™ siap untuk digandingkan.

Jangan gunakan pemancar smartdot™ ketika sedang dicas.




Muat turun aplikasi


1. Pakar penjagaan kesihatan anda akan membuka satu akaun di aplikasi yang berkaitan. Anda akan menerima e-mel undangan dengan arahan tentang cara muat turun aplikasi yang serasi.
2. Setelah aplikasi yang serasi dipasang pada telefon pintar anda, anda boleh log masuk dengan kata laluan sementara yang diberikan kepada anda dalam e-mel undangan.

Pasangkan aplikasi yang serasi pada telefon pintar anda dengan memasukkan maklumat pengenalan diri anda.



Pasangkan pemancar smartdot™ anda dengan aplikasi tersebut.

1. Aktifkan Bluetooth®  pada telefon pintar anda.
2. Letakkan pemancar smartdot™ berdekatan dengan telefon pintar anda.
3. Buka aplikasi dan ikuti arahan di layar untuk memasangkannya dengan pemancar anda.
4. Setelah berjaya digandingkan, pemancar smartdot™ akan menyalakan **lampu hijau**. Aplikasi anda juga akan mengesahkan bahawa proses gandingan sudah berjaya.

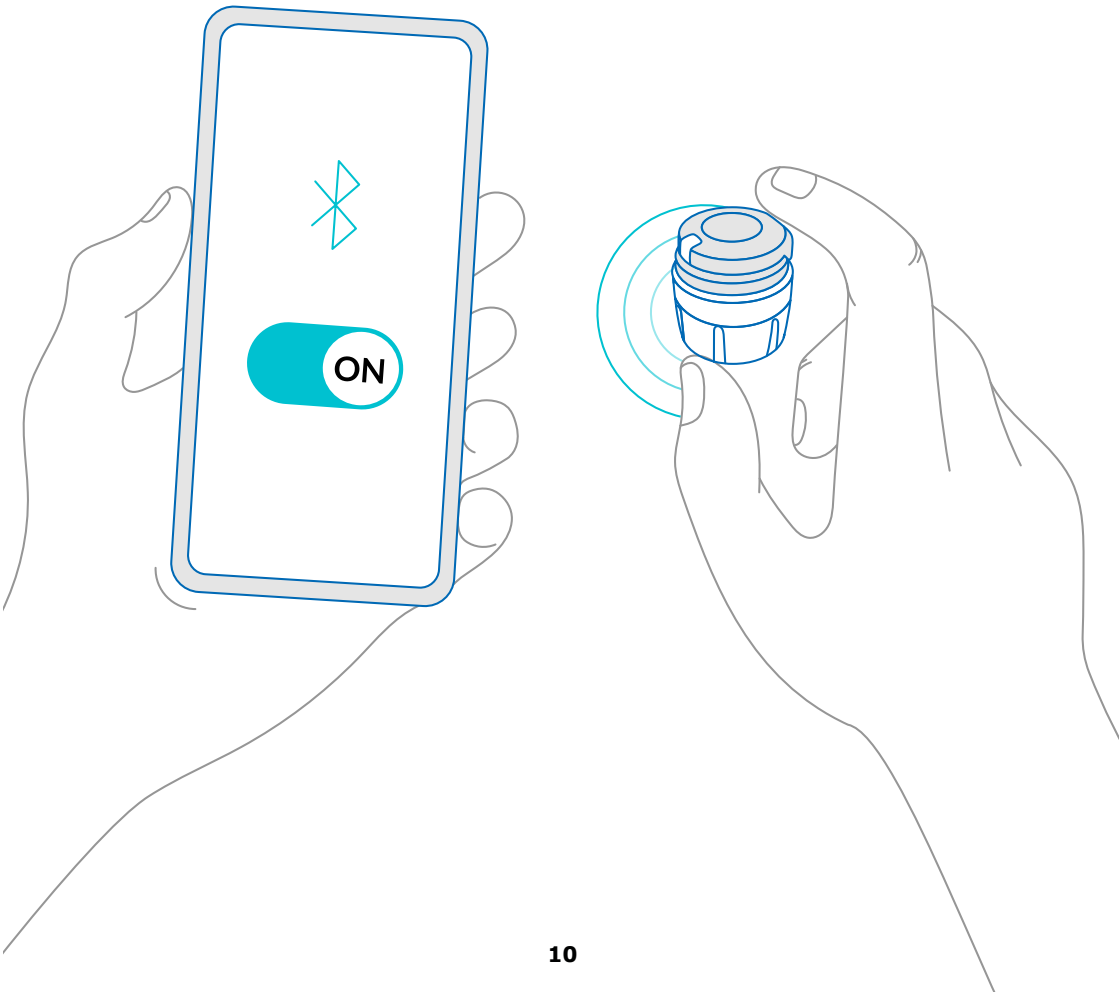




Letakkan pemancar smartdot™ pada pen penyuntik anda

1. Pegang pen dengan satu tangan supaya anda boleh melihat dial pemilihan dos.
2. Dengan tangan yang lain, pegang pemancar smartdot™ pada dial pemilihan.
3. Tempatkan pemancar pada dial pemilihan pada pen dan pusingkan dial pemilihan pemancar ke bawah hingga dial pemilihan dos tertutup sepenuhnya oleh pemancar smartdot™ dan anda tidak boleh lagi memusingkannya.

Jangan pegang atau tekan butang suntikan ketika meletakkannya pada pen.

Catatan:

Pemancar smartdot™ boleh diletakkan pada pen tidak kira arah apa pun. Pemancar adalah bertujuan untuk merakam data suntikan, ia tidak akan menunjukkan cara menyuntik.

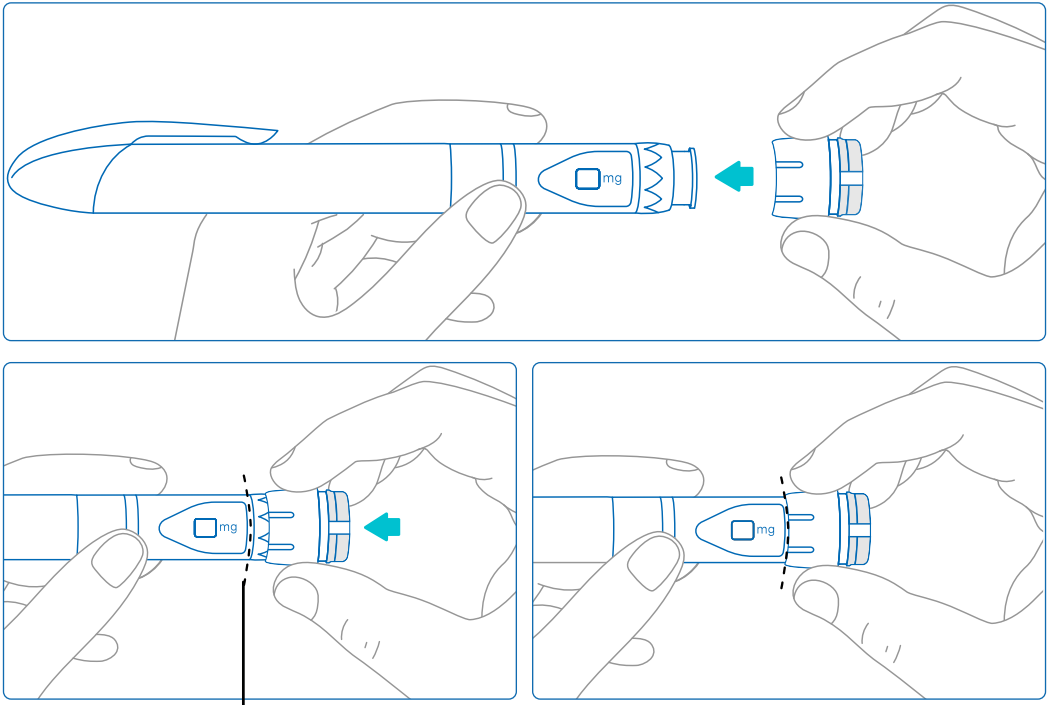

Pemancar smartdot™ harus sepenuhnya menutupi dial pemilihan dos pada pen

E Aktifkan pemancar smartdot™ anda

Catatan:

Anda harus mengaktifkan pemancar smartdot™ untuk menggunakannya. Hal ini akan membolehkan pemancar anda merakam data ketika anda melakukan suntikan. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai penghantaran data, rujuk "Bahagian 8: Pertanyaan Umum <F. Bagaimana pemancar smartdot™ memindahkan data suntikan?"


1. Tekan butang suntikan pada pemancar smartdot™ sehingga anda melihat **lampu ungu**.
2. Sekarang lepaskan butang. Pemancar akan memaparkan **lampu hijau**. Ini bermakna pemancar smartdot™ telah berjaya diaktifkan.

PENTING:


Jika anda tidak melihat lampu hijau semasa anda melepaskan butang suntikan atau apabila anda menekan butang selepas langkah pengaktifan, ini bermakna pengaktifan telah gagal. Ulangi langkah 1 dan 2 dan cuba lagi.

Jangan ulangi langkah pengaktifan jika anda melihat lampu hijau. Jika pemancar smartdot™ telah diaktifkan, pengulangan langkah yang sama akan menyahaktifkannya. Untuk maklumat lanjut tentang penyahaktifan pemancar, rujuk "Bahagian 8: Pertanyaan Umum, <C. Bagaimanakah cara saya mematikan dan menangalkan pemancar smartdot™?".


Langkah 1a

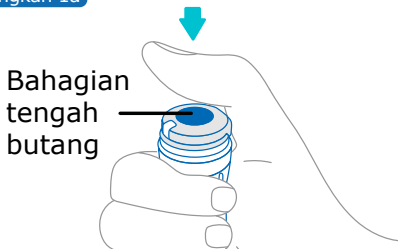


Langkah 1b

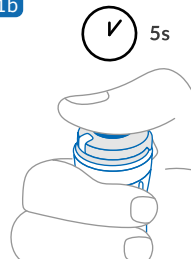

Langkah 2a

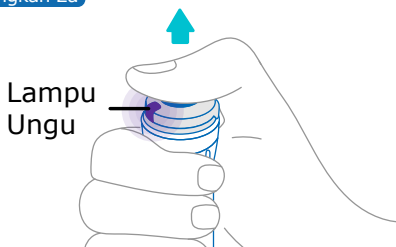

Langkah 2b

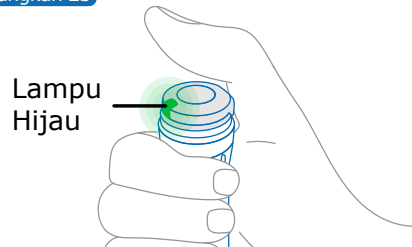

Catatan :

Pemancar smartdot™ anda tidak mengubah suai proses suntikan pen penyuntik anda. Ikut arahan penggunaan pen untuk menyediakan dan melakukan suntikan anda. Langkah di bawah hanya meliputi penggunaan pemancar smartdot™.

Lampu hijau akan menyala apabila butang suntikan ditekan. Ini bermakna bahawa pemancar bersedia untuk merekodkan suntikan. Semasa suntikan, nyalaan lampu hijau bermakna data suntikan sedang diukur.

Anda tidak perlu melihat lampu hijau semasa suntikan, ia tidak menunjukkan cara suntikan. Sentiasa ikuti langkah untuk suntikan pen.

1. Sediakan pen penyuntik anda seperti yang ditunjukkan dalam arahan penggunaan pen. Perhatikan penyesuaian masa yang dinyatakan dalam arahan penggunaan pen sebelum menggunakannya.
2. Pusingkan dail pemilihan dos pada pemancar smartdot™ sehingga dos yang anda inginkan kelihatan dalam tettingkap bacaan dos.
3. Lakukan suntikan anda seperti yang diarahkan dalam arahan penggunaan pen.

PENTING :

Sebelum menarik keluar pen daripada kulit anda, pastikan nombor "0.0" dipaparkan dalam tettingkap dos untuk memastikan anda telah menyuntik dos penuh.

4. Keluarkan jarum dari kulit anda, kemudian lepaskan butang suntikan. **Lampu hijau** akan menyala selama beberapa saat lagi.


Catatan:

Hubungi pakar penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang pen penyuntik anda atau jika anda tidak pasti sama ada anda telah menyuntik dos yang ditetapkan. Jika anda mempunyai sebarang keraguan tentang penyelarasan data melalui aplikasi atau dengan data yang dipaparkan, hubungi pakar penjagaan kesihatan anda.


Catatan:

Jika bateri pemancar smartdot™ lemah, lampu hijau akan bertukar menjadi jingga selama beberapa saat, sebaik sahaja butang suntikan dilepaskan. Rujuk "Bahagian 9: Panduan Penyelesaian Masalah <Lampu Jingga>" untuk butiran lanjut.

Langkah 1

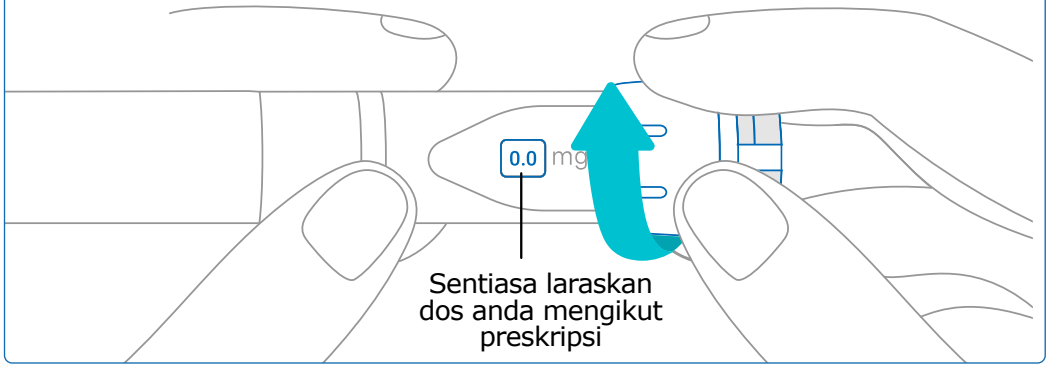

Langkah 2a

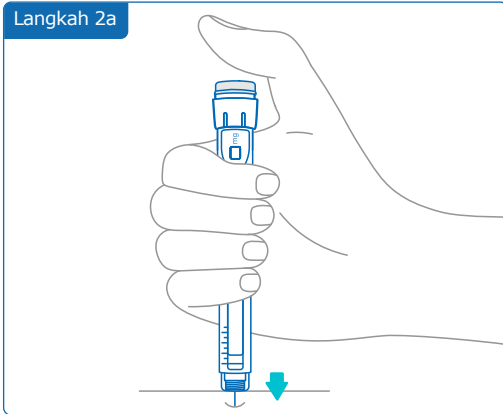


Langkah 2b



Catatan:

Sesuaikan kedudukan anda supaya anda berasa selesa dan boleh menyuntik dos tanpa menukar kedudukan atau jari semasa suntikan. Gunakan ibu jari atau jari telunjuk anda. Kekalkan kedudukan dan jari yang sama semasa suntikan.

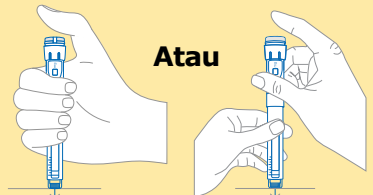


Langkah 2c

Teruskan menekan butang dan hitung perlahan-lahan hingga 10




Langkah 3a


Pastikan nombor "0.0" dipaparkan pada tettingkap dos untuk memastikan anda telah menyuntik dos penuh.

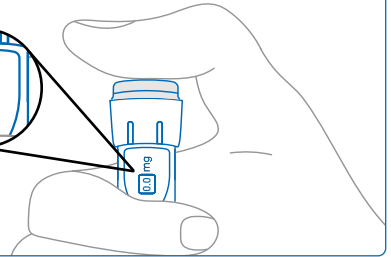


Langkah 3b

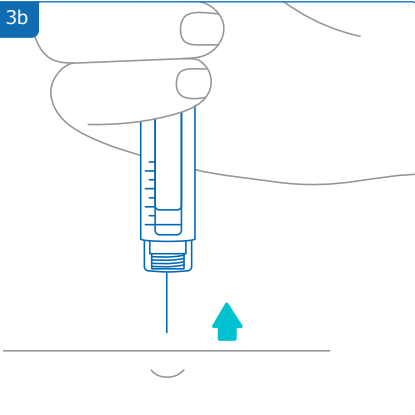

Langkah 3c

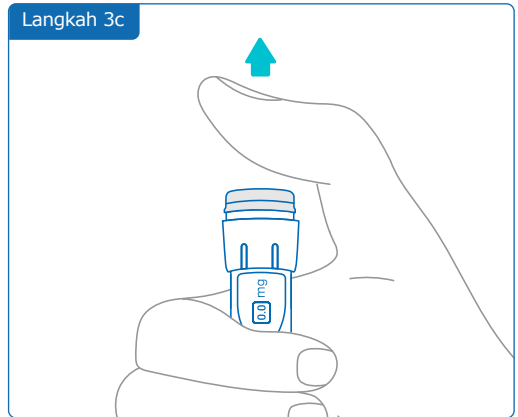


Letakkan pen penyuntik anda dan pemancar smartdot™ yang dipasangkan ke dalam bekas simpanan pen. Simpan mengikut arahan dalam risalah maklumat pesakit Saizen®.

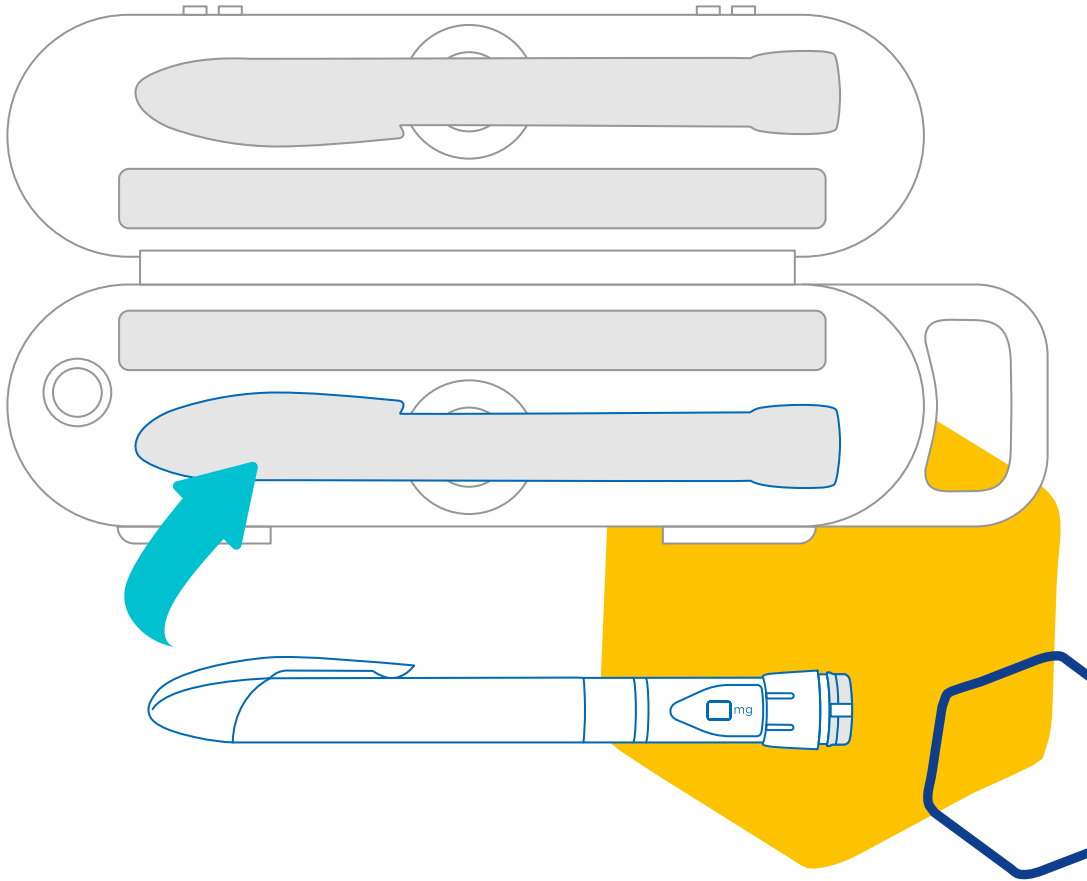

Nota:

Pemancar smartdot™ anda direka bentuk untuk suhu penyimpanan antara 2°C dan 40°C.

A Bagaimana saya memastikan keadaan pemancar smartdot™ saya ?

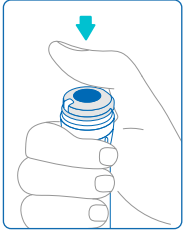

Setelah pemancar smartdot™ disambungkan kepada aplikasi, anda boleh menekan butang suntikan pada bila-bila masa. Ini akan mengaktifkan pemancar daripada mod bersedia dan lampu akan menyala selama beberapa saat. Lampu ini boleh menjadi hijau, jingga atau merah. Rujuk "[Bahagian 9: Panduan Penyelesaian Masalah](#)" jika anda melihat lampu merah atau jingga, atau tiada lampu sama sekali.

Jangan bermain-main dengan pen penyuntik atau pemancar smartdot™ anda. Hanya laraskan dos anda apabila anda hendak melakukan suntikan.

B Bagaimanakah saya boleh menyenggara pemancar smartdot™ saya?

Anda boleh mengelap pemancar anda dengan kain lembap dan bersih apabila diperlukan, apabila pemancar :

- Dipasang pada pen penyuntik - untuk mengelap permukaan luar
- Dialihkan keluar daripada pen penyuntik - untuk mengelap permukaan dalaman. Untuk tujuan ini, anda mesti mematikan pemancar smartdot™ anda sebelum mengalihkannya keluar daripada pen. Rujuk "[Bahagian 8: Pertanyaan umum <C. Bagaimanakah saya mematikan dan mengalih keluar pemancar smartdot™? >](#)".

Jika anda mengalih keluar pemancar smartdot™ daripada pen:

1. Letakkan pemancar anda kembali pada pen anda. Rujuk "[Bahagian 5: Persediaan <D. Letakkan pemancar smartdot™ pada pen penyuntik anda.>](#)"
2. Aktifkan semula pemancar anda. Rujuk "[Bahagian 5: Persediaan <E. Pengaktifan pemancar smartdot™ anda.>](#)"

Jangan lap pemancar smartdot™ anda semasa ia disambungkan kepada sumber kuasa luaran. Cabut plag pemancar sebelum mengelapnya.

Jangan rendam pemancar smartdot™ dalam air. Pemancar ini tidak kalis air dan anda boleh merosakkannya.

Jangan tinggalkan pemancar smartdot™ anda atau aksesori anda di tempat yang berdebu.

Jangan gunakan larutan pembersih, bahan kimia atau kain yang direndam alkohol.



Bagaimanakah cara saya mematikan dan mengalih keluar pemancar smartdot™?

Pemancar smartdot™ mesti dimatikan sebelum ia boleh dikeluarkan daripada pen. Ini akan mengelakkan perekodan data secara tidak sengaja.


Anda mesti mematikan pemancar sebelum mengambil tindakan berikut:

- Lap permukaan dalaman pemancar smartdot™ atau pen penyuntik anda
 - Cas pemancar smartdot™ apabila suhu bilik melebihi 25°C.
 - Gunakan pemancar smartdot™ pada pen penyuntik baharu
1. Tekan pemancar smartdot™ selama 5 saat, sehingga **lampu hijau** bertukar kepada **ungu**.
 2. Lepaskan butang sebaik sahaja anda melihat **lampu ungu**.
 3. Lampu akan padam. Pemancar kini dimatikan dan suntikan tidak akan direkodkan lagi.


Anda kini boleh menarik keluar pemancar dari pen.

Untuk mengaktifkan semula pemancar smartdot™, rujuk "[Bahagian 5: Persediaan <E>. Pengaktifan pemancar smartdot™ anda.](#)"


Langkah 1

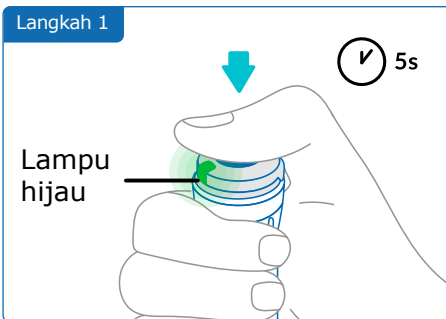

Langkah 2

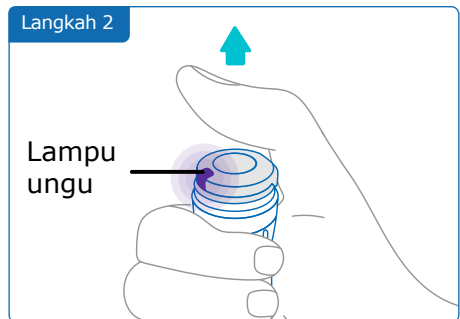

Langkah 3

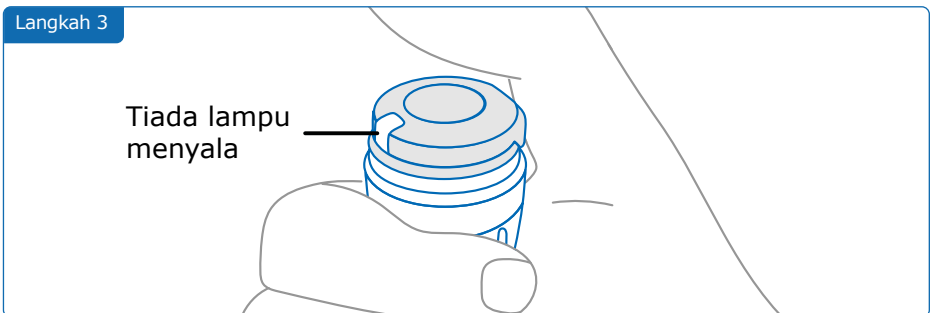

D Bagaimanakah saya boleh melancong dengan membawa pemancar smartdot™?

Letakkan pen penyuntik anda bersama pemancar smartdot™ yang dipasang padanya dalam kotak simpanan pen. Simpan mengikut risalah maklumat pesakit Saizen®.

E Bagaimana untuk menggandingkan pemancar smartdot™ dengan telefon pintar baharu?

Jika anda ingin menggandingkan pemancar anda dengan telefon pintar baharu:

1. Buka aplikasi dan pastikan semua data suntikan anda disegerakkan. Rujuk 'Bahagian 8: Pertanyaan umum <F. Bagaimanakah smartdot™ memindahkan data suntikan?' dan segarkan semula halaman utama dengan meleret ke bawah skrin.
2. Tetapkan semula pemancar anda. Rujuk "Bahagian 9: Panduan Penyelesaian Masalah <A. Penetapan semula pemancar smartdot™ anda."
3. Muat turun aplikasi ke telefon pintar baharu anda. Rujuk "Bahagian 5: Persediaan <B. Muat turun aplikasi."
4. Ikuti langkah A hingga E dalam "Bahagian 5: Persediaan."

F Bagaimanakah pemancar smartdot™ memindahkan data suntikan?

Pemancar smartdot™ akan memindahkan data secara automatik ke aplikasi anda jika:

- Pemancar anda digandingkan dengan aplikasi anda. Rujuk "Bahagian 5: Persediaan <C. Penggandingan pemancar smartdot™ anda dengan aplikasi."
- Telefon pintar berada berhampiran dengan pemancar.
- Bluetooth® telefon pintar diaktifkan.
- Aplikasi dibuka.

PENTING:

Setelah pemancar digandingkan dengan aplikasi, anda boleh melakukan 100 suntikan dengan pemancar smartdot™ tanpa membuka aplikasi. Anda mesti membuka aplikasi sekurang-kurangnya sekali sebulan untuk membenarkan pemindahan data.



Bilakah saya perlu menetapkan semula pemancar smartdot™?

Anda perlu menetapkan semula pemancar smartdot™ anda jika:

- Ia menyalakan **lampu merah**.
- Anda mahu menggandingkannya dengan telefon pintar baharu.
- Anda mahu memadamkan data suntikan daripada pemancar smartdot™.

Untuk menetapkan semula pemancar anda, rujuk "[Bahagian 9: Panduan Penyelesaian Masalah <A. Penetapan semula pemancar smartdot™ anda.](#)"




Bagaimanakah saya boleh melupuskan pemancar smartdot™?

Pemancar smartdot™ telah direka bentuk untuk bertahan 3 tahun selepas penggunaan pertamanya.

Pemancar ialah produk elektronik. **Jangan** buang ke dalam sisa isi rumah. Buangnya mengikut undang-undang tempatan.

Sebelum melupuskan pemancar smartdot™ anda, tetapkannya semula untuk memadamkan data perubahan peribadi anda. "[Bahagian 9: Panduan Penyelesaian Masalah <A. Penetapan semula pemancar smartdot™ anda.](#)"

Apa yang saya dapat lihat ?

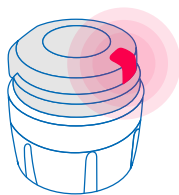Lampu merah

Bilakah lampu suar ini menyala ?

Lampu merah mungkin muncul apabila butang ditekan.

Apakah maksudnya ?

Pemancar smartdot™ rosak dan tidak boleh merekod suntikan anda. Ia perlu ditetapkan semula.

Apa yang perlu saya lakukan ?

A. Tetapkan semula pemancar smartdot™ anda.

Nota: Penetapan semula akan memadamkan data yang disimpan dalam pemancar, menyahaktifkan pemancar dan memutuskan gandingannya dengan aplikasi. Terdapat dua cara untuk menetapkan semula pemancar smartdot™ anda.


Pilihan 1: Penetapan semula dengan aplikasi

1. Buka aplikasi dan pastikan semua data anda telah disegerakkan. Rujuk [`Bahagian 8: Pertanyaan umum <F. Bagaimanakan smartdot™ memindahkan data suntikan?`](#) dan segarkan semula halaman utama dengan meleret ke bawah skrin.
2. Buka "Penetapan semula pemancar smartdot™ anda" dalam aplikasi anda dan pilih "Penetapan semula pemancar smartdot™". Pemancar akan menyalakan **lampu merah** yang berkelip semasa penetapan semula berlaku.
3. Hidupkan pemancar smartdot™ dengan menyambungkannya sehingga anda melihat **lampu** pengecasan **biru**, kemudian cabut kabel USB. Rujuk langkah C hingga E dalam ["Bahagian 5: Persediaan."](#)

Bersambung pada halaman seterusnya ➔

Pilihan 2: Penetapan semula dengan kabel pengecasan

1. Sambungkan pemancar ke pengecas USB dinding yang dihidupkan menggunakan kabel USB yang dihidupkan.
2. Cabut plag dari kabel dengan cepat.
3. Ulangi tindakan ini tiga kali atau sehingga anda melihat **lampu merah** berkelip.

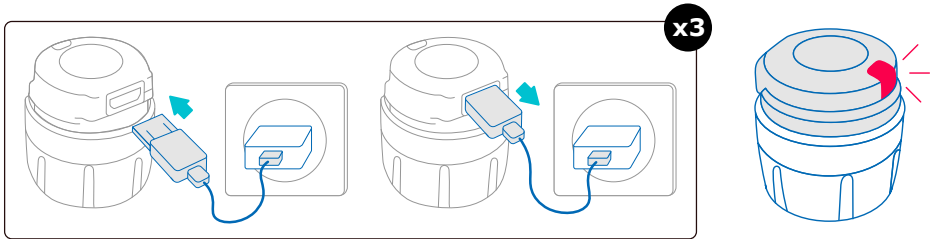


4. Hidupkan pemancar smartdot™ dengan menyambungkannya sehingga anda melihat **lampu** pengecasan **biru**, kemudian cabut kabel USB. Rujuk langkah C hingga E dalam "Bahagian 5: Persediaan."

Jika lampu merah terus menyala, pemancar anda masih tidak berfungsi. Keluarkannya dari pen penyuntik anda dan hubungi pakar penjagaan kesihatan anda untuk mendapatkan bantuan.

Nota: Anda masih boleh melakukan suntikan tanpa menggunakan pemancar anda.

Apa yang saya dapat lihat ?

Lampu jingga

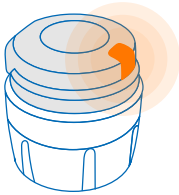

Bilakah lampu suar ini menyala ?

Lampu jingga mungkin menyala:

- Apabila butang ditekan dan bateri lemah
- Apabila butang dilepaskan pada penghujung suntikan dan bateri lemah


Apakah maksudnya ?

Bateri pemancar smartdot™ lemah. Ia mesti dicas.


Apa yang perlu saya lakukan ?

B. Sila cas pemancar smartdot™ anda

1. Sambungkannya ke kabel USB yang dibekalkan.
2. Sambungkan kabel ke pengecas dinding USB yang dihidupkan.
3. Semasa mengecap, pemancar akan memaparkan **lampu biru** berkelip. Pengecasan penuh boleh mengambil masa sehingga 2 jam.
4. Apabila pemancar dicas sepenuhnya, **lampu biru berkelip** akan hilang, dan anda boleh menarik keluar kabel pengecasan.

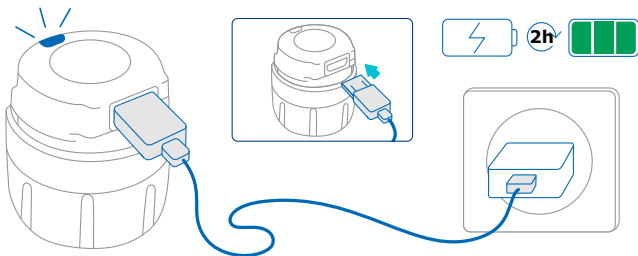

Nota: Jika anda mengecap di dalam bilik yang suhunya melebihi 25°C, anda mesti mematikan pemancar smartdot™ dan mengeluarkannya daripada pen anda. Lihat "Bahagian 8: Pertanyaan Umum <C. Bagaimanakah cara saya mematikan dan mengalih keluar pemancar smartdot™?"

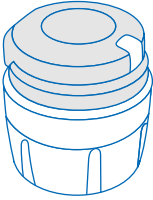Apa yang saya dapat lihat ?	Bilakah lampu suar ini menyala ?
<p data-bbox="138 244 415 276">Tiada tanda isyarat</p> 	<p data-bbox="561 244 997 308">Apabila butang ditekan dan lampu suar tidak menyala.</p>
Apakah maksudnya ?	Apa yang perlu saya lakukan ?
<p data-bbox="76 662 421 726">Pemancar smartdot™ tidak dihidupkan.</p> <p data-bbox="76 746 460 837">Ia belum dicas buat kali pertama atau telah ditetapkan semula.</p>	<ol data-bbox="561 662 1020 1077" style="list-style-type: none">1. Hidupkan pemancar smartdot™ dengan menyambungkannya dan mencabutkannya sekali bersama kabel pengecasan, setelah disambungkan kepada sumber kuasa luaran.2. Rujuk langkah C hingga E dalam "<u>Bahagian 5: Persediaan.</u>"3. Aktifkan pemancar anda. Rujuk "<u>Bahagian 5: Persediaan <E. Pengaktifan pemancar smartdot™ anda.</u>"

Bersambung pada halaman seterusnya ➡

Apakah maksudnya ?	Apa yang perlu saya lakukan ?
<p>Bateri telah dinyahcas.</p>	<p>Sebelum anda boleh menggunakan pemancar smartdot™ anda semula, anda perlu melengkapkan langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cas pemancar smartdot™ anda sehingga lampu biru berhenti berkelip. 2. Buka aplikasi anda. Pada skrin utama, tekan sepanduk yang mengatakan: "Pemancar smartdot™ belum bersedia". Ikuti arahan pada skrin langkah demi langkah untuk menyambung semula pemancar smartdot™ ke aplikasi mudah alih menggunakan Bluetooth® dan untuk mengaktifkan semula pemancar. 3. Semak sama ada sepanduk status pemancar pada aplikasi (halaman utama) menyatakan "Pemancar smartdot™ sudah bersedia" sebelum menggunakan pemancar smartdot™ anda.
<p>Pemancar smartdot™ telah dimatikan atau pengaktifan gagal.</p>	<p>Rujuk "Bahagian 5: Persediaan <E Pengaktifan pemancar smartdot™ anda."</p>
<p>Jika masih tiada lampu, tarik keluar pemancar smartdot™ dari pen anda dan hubungi pakar penjagaan kesihatan anda untuk mendapatkan bantuan.</p> <p>Nota: Anda masih boleh melakukan suntikan anda tanpa menggunakan pemancar anda.</p>	

Jika terdapat masalah dengan pen penyuntik anda, rujuk kepada arahan penggunaan pen.

Pengisytiharan pematuhan 2014/53/EU


- BIOCORP PRODUCTION mengisytiharkan bahawa peralatan radio jenis pemancar smartdot™ mematuhi Arahan 2014/53/EU (RED).
- Teks penuh Pengisytiharan EU boleh didapati di halaman web berikut: <https://biocorpsys.com/smartdot-certification-red/>
- Di Eropah, anda boleh meminta salinan bercetak percuma bagi arahan penggunaan ini dengan melengkapkan borang yang tersedia di <https://biocorpsys.com/ifu/>

AMARAN

- Elakkan daripada menggunakan pemancar ini berdekatan atau bertindan dengan peranti lain, kerana ini boleh menyebabkan pemancar tidak berfungsi. Sekiranya penggunaan sedemikian perlu, pantau pemancar ini dan peranti lain untuk memastikan alat-alat ini berfungsi secara normal.
- Penggunaan aksesori, transduser dan kabel selain daripada yang ditetapkan atau dibekalkan oleh pengeluar peralatan ini boleh mengakibatkan peningkatan pelepasan elektromagnet atau pengurangan kekebalan peralatan ini dan boleh menyebabkan pemancar tidak berfungsi.
- Peranti komunikasi berfrekuensi radio (FR) mudah alih (termasuk perkakasan seperti kabel antena dan antena luaran) tidak boleh dikendalikan dalam jarak kurang daripada 30 cm (12 inci) dari mana-mana bahagian peranti, termasuk kabel yang ditentukan oleh pengilang. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini boleh menjejaskan prestasi peranti ini.

Pengisytiharan pematuhan 2012/19/EU dan 2011/65/EU

- BIOCORP PRODUCTION mengisytiharkan bahawa peralatan radio pemancar smartdot™ mematuhi Arahan 2012/19/EU (WEEE) dan Arahan 2011/65/EU (RoHS III) oleh Parlimen Eropah dan Majlis 8 Jun 2011 berkenaan dengan pengekangan penggunaan bahan berbahaya tertentu dalam peralatan elektrik dan elektronik yang akan ke tapak pelupusan.
- Pihak berkuasa awam perlu mengambil langkah yang sesuai untuk pengguna, pengedar dan pengeluar yang menyumbang kepada pengumpulan peralatan elektrik dan elektronik dengan mewujudkan keperluan undang-undang berkenaan penggunaan semula, pemulihan atau kitar semula peralatan tersebut. Lupuskan pemancar smartdot™ mengikut peraturan pihak berkuasa tempatan.

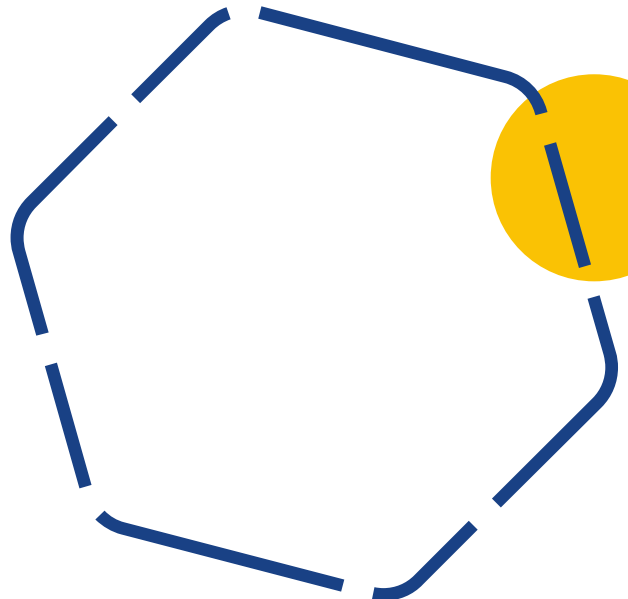

Nombor model : EF36



Spesifikasi modul radio

Pemancar smartdot™ menggabungkan modul Bluetooth® dengan ciri-ciri berikut (penerimaan / penghantaran):

Spesifikasi	Nilai
Jenis Bluetooth® Tenaga Rendah	BLE
Jalur frekuensi	[2400 - 2483.5] MHz
Bilangan saluran	40
Jarak saluran	2 MHz
Lebar jalur	1 MHz
EIRP maks (Kuasa Tersinar Isotropi Berkesan)	-5,5 dBm



Maklumat berkaitan elektronik (1 daripada 2)

Ciri USB	
Voltan terkadar	5 V DC
Arus terkadar	2 A (min 500 mA)
Nombor model	0373707
Spesifikasi bateri	
Bateri	Li-ion boleh dicas semula: Li-ion 3.7V-45mAh
Jangka hayat bateri pada cas penuh	2 minggu (penggunaan sekali sehari)
Jangka masa pengecasan bateri	Cas penuh selepas 2 jam

Gunakan pengecas USB yang diperakui IEC/UL 60950-1 atau IEC/UL 62368-1 (dengan penanda CE atau UL) untuk mengecap bateri melalui kabel USB yang dibekalkan.

Pembuangan bateri ke dalam api atau ketuhar panas, seperti penghancuran mekanikal atau pemotongan bateri boleh mengakibatkan letupan.

Penyimpanan bateri pada persekitaran suhu yang sangat tinggi boleh menyebabkannya meletup atau membocorkan cecair atau gas yang mudah terbakar.



Maklumat berkaitan elektronik (2 daripada 2)

Sambungkan kabel USB yang dibekalkan ke port USB pada penyusuai AC yang sesuai untuk kawasan anda dengan spesifikasi berikut:

Pengecas USB (tidak disertakan)

Pengecas USB yang diperakui IEC/UL 60950-1 atau IEC/UL 62368-1 (dengan penanda CE atau UL)

Modul luaran yang sesuai dengan adaptasi automatik voltan: tiada pemilihan diperlukan.

Julat voltan masukan

90-264 V

Jarak frekuensi

47-63 Hz

Kategori

II (pemencilan berganda)

Voltan keluaran

5V DC

Arus keluaran

100 mA - 2 A - Kelas tenaga
PS1 untuk bekalan kuasa
melalui USB

Anda bertanggungjawab terhadap keselamatan dan pengurusan telefon pintar anda. Jika anda mengesyaki isu keselamatan siber berhubung dengan pemancar smartdot™ atau aplikasi yang berkaitan, hubungi pakar penjagaan kesihatan anda.

Pastikan telefon pintar dan pemancar smartdot™ anda disimpan di tempat yang selamat di bawah pengawalan anda. Ini penting untuk menghalang individu lain daripada mengakses atau merosakkan telefon pintar atau pemancar smartdot™ anda.









Aplikasi yang digunakan dengan pemancar smartdot™ tidak bertujuan untuk digunakan pada telefon pintar yang telah diubah atau dikhususkan untuk membuang, menggantikan atau memintas sebarang konfigurasi atau sekatan penggunaan yang diluluskan oleh pengeluar, atau yang melanggar jaminan oleh pengeluar.

Aplikasi yang digunakan dengan pemancar smartdot™ memerlukan telefon pintar anda berada pada tarikh dan masa yang betul untuk merekodkan data suntikan anda. Tarikh dan masa telefon pintar anda hendaklah ditetapkan untuk pengemaskinian secara automatik. Anda boleh menyemaknya dalam parameter telefon pintar anda.






Pastikan telefon pintar anda dicas sepenuhnya dan dihidupkan untuk membolehkan pemancar smartdot™ menghantar data suntikan anda secara berkala.

Mohon ambil maklum bahawa selepas kemas kini sistem pengendalian dilakukan, prestasi luar jangka mungkin diperhatikan. Buka aplikasi anda, semak pemancar dan aplikasi smartdot™ anda untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik.


Sila ambil perhatian bahawa jika aplikasi dan pemancar smartdot™ digunakan dalam persekitaran yang tertakluk kepada gangguan elektromagnet (isyarat menghampiri 2.4 GHz), komunikasi BLE tidak lagi boleh dilakukan dan sambungan antara keduanya akan ditutup. Pemancar smartdot™ bagaimanapun akan terus merekod suntikan. Apabila gangguan isyarat elektromagnet hilang, aplikasi dan pemancar smartdot™ boleh berkomunikasi semula.

Simbol	Penerangan dan maklumat
	Panduan pengguna ; arahan penggunaan. Anda perlu merujuk arahan penggunaan di https://biocorpsys.com/ifu-smartdot/
	Pengeluar
	Penanda Pematuhan Eropah
	Nombor siri
	Tarikh dan negara pengeluar
	Nombor kelompok
	Rujukan produk
	Rujukan pengedar
	Arus terus

Bahagian 13 · Simbol dan maklumat pembungkusan

Simbol	Penerangan dan maklumat
	Untuk kegunaan dalaman sahaja
IP32	<p>Indeks Perlindungan Kemasukan IP32</p> <p>Perlindungan terhadap objek pepejal lebih daripada 2.5 mm</p> <p>Perlindungan terhadap titisan, jika perumah diletakkan pada sudut 15 darjah atau kurang dari sudut menegak.</p>
	<p>Peranti sensitif kelembapan</p> <p>Jangan dedahkan peranti kepada kelembapan</p>
	<p>Had suhu di mana peranti boleh terdedah dengan selamat.</p> <p>+2°C hingga +40°C</p>
	<p>Had kelembapan di mana peranti boleh terdedah dengan selamat.</p> <p>10% hingga 90%</p>
	<p>Had tekanan di mana peranti boleh terdedah dengan selamat.</p> <p>700 hPa hingga 1060 hPa</p>
	Nombor model : EF36

Bahagian 13 · Simbol dan maklumat pembungkusan

Simbol	Penerangan dan maklumat
	<p>Pengurusan sisa elektrik dan elektronik.</p> <p>Pengumpulan dan pemprosesan peralatan elektrik dan elektronik*.</p> <p>Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dibuang bersama sisa isi rumah. Ia mesti dikembalikan kepada sistem pengumpulan sisa tempatan yang sah. Dengan mematuhi prosedur ini, anda akan menyumbang kepada perlindungan alam sekitar dan kesihatan. Bahan kitar semula akan membantu memelihara sumber semula jadi.</p> <p>*Sah di negara anggota EU dan negara dengan tertakluk kepada perundangan berkenaan.</p>



Biocorp Production
ZI de Lavour La Bechade
63500 Issoire – France

Saizen, smartdot ialah tanda dagangan berdaftar oleh
Merck KGaA, Darmstadt, Jerman atau sekutunya.

